

TEST DE COPA

6 DROGAS EN ORINA CON LLAVE

La copa es un dispositivo que detecta 6 drogas, tiene control de adulterantes y llave de seguridad. Combina la recolección de orina y la prueba en un solo paso, evitando la manipulación de las muestras. Físicamente separa las muestras de orina recolectadas y las muestras a analizar para evitar contaminación. Solo se usa para diagnóstico in vitro.

Contenedor	INVOLABLE CON LLAVE
Detección	6 parámetros
Tipos de Drogas	COC / THC / BZO / AMP / OPI / MET
Requisito Operación	Inmediato o Diferido
Almacenamiento	Período Prolongado
Control Temperatura	Si
Sellado	Hermético




Nombre Droga	Sigla	Nivel Corte ng/ml	Tiempo de detección	
			Mínimo	Máximo
COCAINA	COC	150	24 Horas	48 Horas
MARIHUANA	THC	50	2 Horas	10 Días
ANFETAMINAS	AMP	500	4 Horas	24 Horas
BENZODIAZEPINAS	BZO	200	3 Días	7 Días
OPIÁCEOS	OPI	2.000	2 Horas	3 Días
METANFETAMINAS	MET	500	2 Horas	4 Horas

Uso laboral
Sin manipulación de orina

CONTROL:
DE ADULTERANTE
DE TEMPERATURA
DE PH

CONTROL DE ADULTERANTE

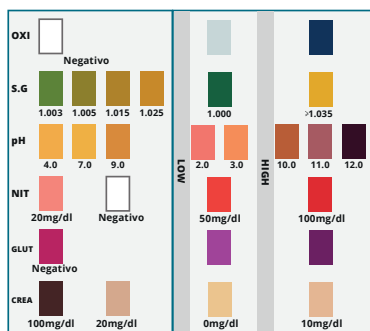

NORMAL ANORMAL

La adulteración es la manipulación de una muestra de orina con la intención de alterar los resultados. El uso de adulterantes o dilución de la muestra puede causar resultados falsos negativos en las pruebas de drogas. Para detectar la adulteración se emplean los controles de adulterantes que determinan características de la orina como pH, la gravedad específica y la creatinina y para detectar la presencia de oxidantes / PCC, nitritos o glutaraldehído en la orina.



TEST DE COPA

6 DROGAS EN ORINA CON LLAVE

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NEGATIVO: Aparecen líneas de color en la región de Control (C) y en la región del test (T). Este resultado negativo indica que la concentración de la droga particular analizada en la muestra de orina está por debajo del valor del cut-off para la droga de que se trate.



NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

POSITIVO: Sólo aparece una línea de color en la región de Control (C) y NO aparece línea de color en la región del test (T). El resultado positivo indica que la concentración de la droga en la muestra de orina es superior al valor del cut-off específico de esa droga.






INVÁLIDO: No aparece línea de color en la región de Control (C). Las razones más comunes para la ausencia de la línea de color en la región de Control son insuficiente volumen de muestra o un procedimiento aplicado incorrectamente. Leer las instrucciones de nuevo y repetir la prueba empleando un nuevo test. Si el resultado continua siendo inválido, contactar con el fabricante.



USO

Permita que el dispositivo de prueba, la muestra y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C).

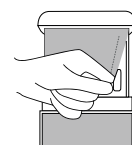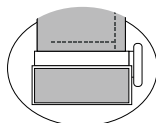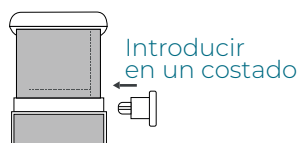

Detección de drogas de un máximo hasta 7 días.

